



Wann ist der easywalker als Hufschutz geeignet?


easywalker+

Für den therapeutischen Einsatz (Hufrolle, Hufrehe, Arthrose, etc.) haben wir den easywalker+ mit integrierter Platte entwickelt. Dieser Beschlag ist auch für den Einsatz zum Schutz der Sohle oder des Strahls bestens geeignet (Distanzsport, sohlenempfindliche Pferde). Die Montage erfolgt wie beim herkömmlichen easywalker, wir empfehlen aber das Ausfüllen des Hohlraumes mit geeignetem Silikon (Luwex, Vettec, etc.).

Für den Wintereinsatz kann der Innenteil an 2 Stellen herausgeschnitten werden und ergibt dann einen Snowgrip in der bekannten Form, mit 2 Stück 5,5 mm Stollen ergibt sich damit ein Winterbeschlag mit hervorragendem Grip auf hartem Schnee und Eis mit geringst möglichem Montageaufwand und Kosten!

easywalker ist als Hufschutz sehr gut geeignet für:

- Alle Pferde mit einigermaßen korrektem Gangverhalten,
- Alle Pferde mit entsprechender Hufform,
- Pferde im Hochleistungssport wie Vielseitigkeit, Springen, Distanzsport (easywalker+ abhängig vom Pferd), Trabrennen,
- Therapeutischen Einsatz (easywalker sowohl mit als auch ohne Platte) bei Huf-, Gelenks- und Sehnenproblemen sowie auch Arthrose, Arthritis, Hufrolle und Hufrehe,
- Pferde, die Steg- oder Eiereisen mit Sohle und Einlage benötigen, easywalker+ ist wesentlich leichter!
- Als Winterbeschlag (easywalker+) mit hervorragendem Grip und integriertem Snowgrip/Platte

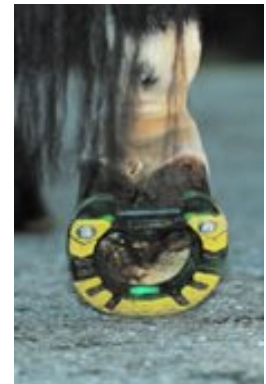

easywalker ist als Hufschutz individuell geeignet für:

- Kutschpferde im Sport und Geländeeinsatz, je nach Nutzung, Geländebedingungen, Gangverhalten
- Distanzpferde, je nach Nutzung, Geländebedingungen, Gangverhalten

easywalker ist als Hufschutz ungeeignet für:

- Pferde mit Hufproblemen wie aufweitender Huf, extreme Fehlstellungen, verletzungsbedingter Bewegungsstörung
- Pferde die spezielle Korrekturbeschläge brauchen,
- Kutschpferde im Fiakerbetrieb,
- Schwere Kaltblutpferde (Gewichtslimit ca. 700 kg bei Größe 150!)